認知症老人徘徊感知機器 ラムロックアイズ-みまもりCUBE-



~大切な家族を見守る、カメラ機能を搭載した福祉用具~

介護保険適用

貸与マーク取得:平成28年4月

TAISコード

01325-000004(1台)

01325-000009 (2台セット)

01325-000010 (3台セット)

01325-000011 (4台セット)



デモ設置(無料1週間お試し)実施中!! 詳細はお取り扱いの事業所へご相談ください。


ひまきり BUBBの特長



みまもりCUBEは在宅(独居/日中独居)で使う徘徊感知機器です!!

※徘徊感知機器を介護保険でご利用する場合は、認知症の診断、要介護2以上または軽度者申請等の手続きが必要な場合があります。

みまもりCUBEはカメラと独自の画像認識技術を一体化したオールインワン製品です。 あらかじめ設定したエリアに一定の変化が起きると自動で検知しお知らせする事が出来ます。

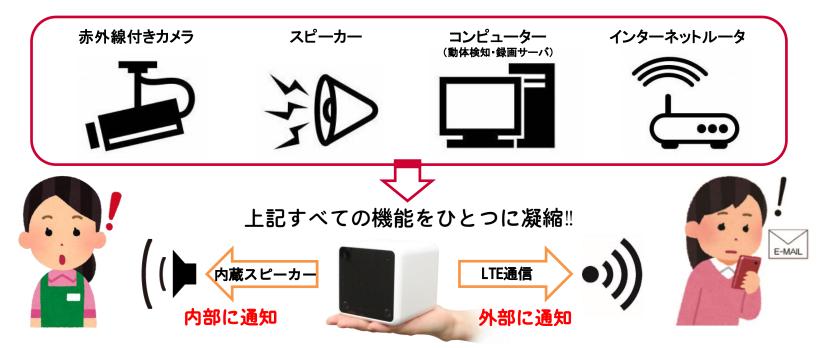

音声でお知らせ音声で呼び止め

(大きさ:約10センチ四方の箱型)

LTE通信を利用して 通信端末に情報発信 (画像付メールの配信)

ひまきり CUE の機能



カメラとインターネット (実費オプション) の機能を活用し、独居または日中独居等の今までわからなかった事や、目が届きにくかった所を、その場で視覚的に確認する事が可能です。推奨する使い方としては大きく分けて3つあります。

①音声でお知らせ

検知時に、みまもりCUBEに内蔵されたスピーカーから音声でお知らせします。 従来のマット型センサーや赤外線センサーと同じような使い方ができます。

②徘徊を未然に防ぐ

検知時に、みまもりCUBEに内蔵されたスピーカーから、予め録音した音声 (家族の声/電話の音等)を自動再生して徘徊時に呼び止めます。 ただし徘徊を必ず防ぐ訳ではありません。

③画像付メールを配信して、遠方に居る家族にお知らせ

検知時に、家族の携帯電話へ画像付メールを配信してお知らせします。 外出時の時間や服装がわかる他、帰宅した時間や来客等もわかります。 またメールの配信先は複数の登録(10件程度)が可能です。 ※画像付メールサンプル



上記の①~③を同時に行うことも可能です。

また、便利な<mark>タイムスケジュール機能</mark>(1時間単位)やお知らせ(音声と画像付メール)のON/OFFもスマートフォンで簡単に操作できます。

※暗視モードを搭載しているので夜間でも検知することが可能です。 ただし映像は白黒で表示されます。



ドアの出入りをお知らせ (徘徊検知)



ドアに近づいたら検知



玄関のドアに向けてみまもりCUBEを設置します。 画像付メールで外出時の服装や時間がわかるので徘徊時 は早期発見の手掛かりになります。また来客があった場 合の確認もできるので、防犯としても役立ちます。

起き上がりをお知らせ(離床検知)



ベッドから身体の一部がはみ出ると検知



寝室のベッドに向けてみまもりCUBEを設置します。 画像付メールで起床や就寝時間等の生活リズムの管理ができます。また怪我や転倒事故があった際に映像を確認する 事で施策を立てることができる。

どの「エリア(場所)」で「何秒間」滞在が続いたらお知らせ(通知)するかを設定できます。

※検知設定は専門知識が問われるため、全て自社オペレーターが遠隔操作にて設定します。

ひませい CUEI その他のアピールポイント



みまもりCUBEで解決できることがあります!!

①非接触タイプなので安全

マット型センサーを避けられたり、対象者が躓いた事はありませんか? みまもりCUBEは非接触タイプなので車いすに巻き込まれる心配もありません。 また直接触れることが無いので、ズレが生じる心配もありません。

②広い範囲や細かい設定が可能なので便利

カメラに映る映像の範囲内で<mark>検知エリア</mark>を設定できるので、センサー等の設置が難しい場所でもご利用できます。また検知設定は専門のオペレーターが遠隔操作で行うので、より細かな調整が電話一本で解決します。

③記録が残るので安心

検知時に配信される画像付メールはご利用者の携帯端末(スマートフォン等)に記録が残ります。 徘徊が起きやすい時間帯や、生活リズムの変化などにいち早く気付く事が可能です。

④お知らせする距離に制限がないので心強い

従来の送信機と受信機タイプの徘徊感知機器では、電波が届く距離は20~30メートルですがみまもりCUBEではインターネットを利用しているので日本中どこにいても情報を受け取れます。


みまもりCUBEは安全確認に特化した次世代の徘徊感知機器だと言えます。

株式会社ラムロックは在宅介護の「徘徊」「孤独死」「介護離職」の問題解決に取り組んでいます。

ひまきり CUEEのサービス説明



画像付メールの受信と「みまもりCUBE」のデータ通信(インターネット契約)のイメージ (新たにスマートフォンを契約するようなイメージになります)

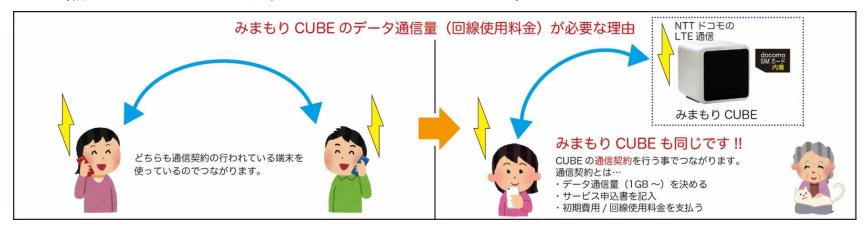

介護保険が使えるラムロックアイズ-みまもりCUBE-は、無料でお試し(デモ設置)する事ができます。 お気軽にお取り扱いの福祉用具貸与事業所へお問い合わせください。

みまもり CUBE お申込みまでの流れ

無料デモ期間は

約1週間です

お試しのご連絡

デモ設置

デモ期間

お申込み



デモ設置日は 事業所の方と 調整してください



事業所のスタッフが設置 説明にお伺いします。



デモ設置した CUBE はそのまま ご利用できます



ご不明な点がございましたらお気軽にラムロックへ連絡ください。 ご契約に関するご連絡はケアマネージャーへお伝えください。 また契約時の GB 数は、デモ期間中に利用した GB 数を参考にできます。

ひまるい GUEGレンタル費用の内訳



内訳			補足説明
ラムロックアイズ-みまもりCUBE レンタル料(介護保険適用)	E- <a>	月額	福祉用具のレンタル料金です。費用は事業所により異なります。(全国平均1,000単位/台 前後) 詳細はご契約の福祉用具貸与事業所へお尋ねください。
回線使用料 (実費オプション)		月額	契約するデータ通信量(1GBあたり1,080円)により異なります。※下記参照
初期費用 (実費オプション)	<c></c>	初月および 追加ご契約時	費用は契約台数や事業所により異なります。詳細はご契約の福祉用具貸与事業所へお尋ねください。
超過使用料 (実費オプション)	<d></d>	超過時	契約したデータ通信量を超過した場合のみ発生します。※下記参照

回線使用料(データ通信量1GBあたり) 	1,080円(月額料金)※
超過使用料(データ通信量1GBあたり) <d></d>	十3,240円(超過料金)※

- ●税込み価格で表示しております。
- ●回線使用料(インターネット使用料)は休止ができません。 また集金代行手数料をご負担いただく場合があります。

+

--

新規契約時の費用 =

レンタル料<A>

回線使用料

初期費用<C>

翌月以降の費用 =

レンタル料<A>

+

+

回線使用料

くB>のデータ通信量を超過すると

超過使用料<D>

が発生します。

お取り扱い貸与事業所