# 日本中 docomo でつながる

●NTT ドコモの通信ネットワークを使用することで、日本全国さまざまなところで、



## あなたの代わりに、徘徊・離床を"検知"します

設置した"みまもりCUBE"が人の動きや異常を検知、映像解析により、日常動作と「徘徊」「離床」「転倒」などの状態を見分けて通知します。

※1) 24時間の録画情報を約5日間保存。過去に遡って異常事態の検証を客観的に行えます。

#### 検知した異常を、瞬時に"お知らせ"します


検知した異常を写真付きメールで、ご家族の携帯電話やスマートフォン等に通知します。機器側ではスピーカーを通じて、予め録音した音声を再生し、徘徊を抑止します。

※1) 離れた場所から高齢者に直接呼びかけることも可能。ご 家族の声掛けで高齢者も安心できます。

※1) オプションとなりますので、お問合せください。

#### みまもりCUBEの検知の流れ

玄関や寝室にみまもりCUBEを設置します。徘徊や離床、転倒があった場合は、下記のように通知します。

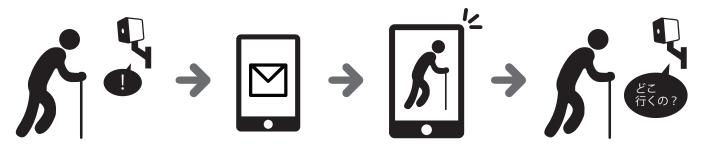

徘徊や離床を検知

携帯やスマホでメールを受信

カメラ映像をスマホで確認

録音した音声、又は呼びかけで徘徊を防止

#### 検知した時に、呼びかけを行うことで徘徊の防止を行います。 ※オプションとなりますので詳しくはお問合せください。

#### みまもり CUBE の特徴

「外出」を検知 ・・・・・・・ 部屋から出る姿を「みまもりCUBE」が自動で検知します。また入ってくる人の検知も可能です。











#### このような問題が解決できます

- 離れて暮らすご家族の見守りをしたい
- 徘徊を未然に防ぎたい
- 外出時の服装を確認したい
- ○ベッドから離床を発見したい
- 転倒者を早期に発見したい
- 危険個所に近づかないようにしたい


#### 保険適応外の商品では…

- ○オフィスへの来訪者を検知したい
- ○ドアの開閉記録を残したい
- レジの開閉記録を残したい
- 立ち入り禁止箇所への侵入を検知したい

### みまもり CUBE 外観



実際のメール画面

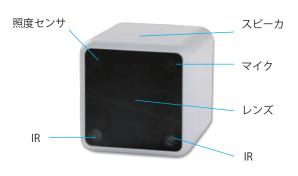

#### みまもり CUBE 仕様

外形寸法	90 (W) ×100 (D) ×90 (H) mm
質量	本体 310g 以下(付属品は除く)
スピーカー	内蔵スピーカー(出力 2W)
マイク	内蔵マイク ×1(集音距離 3m)
有線 LAN	10/100BASE-T
無線 LAN	IEEE802.11/b/g/n
モバイル	ドコモ LTE
動作温度	0 ~ 40℃
電源	AC100V 50/60Hz AC アダプタ

#### TAIS コード一覧

セット数:1台	01325-000004
セット数:2台	01325-000009
セット数:3台	01325-000010
セット数:4台	01325-000011

※携帯やスマホはセットに含まれまれておりません。

【みまもり CUBE サービス提供・製造】

